

**Измерение концентраций 3,4-диметоксифенилацетонитрила (гомонитрила) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны**

**Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации**

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Измерение концентраций 3,4-диметоксифенилацетонитрила (гомонитрила) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны**

**МУК 4.1.0.363-96**

**Минздрав России**

**Москва · 1999**

1. Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям (ПДК) и ориентировочно безопасным уровням воздействия (ОБУВ) - санитарно-гигиеническим нормативам и являются обязательными при осуществлении санитарного контроля.

2. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (выпуск 32) утверждены и. о. Председателя Госкомсанэпиднадзора России - заместителем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 8 июня 1996 г.

3. Введены впервые.

4. Включенные в данный выпуск методики контроля разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТа 12.1.005-88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования», ГОСТа 12.1.016-79 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ», ГОСТа Р 1.5-92 п. 7.3, ГОСТа 8.101-90 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений». Методические указания одобрены комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Госкомсанэпиднадзора России и Проблемной комиссией «Научные основы гигиены труда и профпатологии».

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (выпуск 32) предназначены для центров Госсанэпиднадзора, санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также заинтересованных министерств и ведомств.

Ответственный исполнитель: Г.А. Дьякова

Исполнители: Г.А. Дьякова, Л.Г. Макеева, Е.М. Малинина, С.М. Попова, Н.С. Горячев, М.И. Аржанова, Т.В. Рязанцева, Е.Н. Грицен.

**УТВЕРЖДЕНО**

И. о. Председателя Госкомсанэпиднадзора

России - заместителем Главного  
государственного санитарного врача

Российской Федерации

Г.Г. Онищенко


8 июня 1996 г.

**МУК 4.1.0.363-96**

Дата введения: с момента утверждения

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Измерение концентраций 3,4-диметоксифенилацетонитрила (гомонитрила) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны**

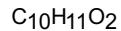

М. м. 177,2

3,4-Диметоксифенилацетонитрил (гомонитрил, 3,4-диметоксибензилцианид) - кристаллический порошок со слабым характерным запахом.  $T_{пл.}$  - 82 °C.  $T_{кип.}$  - 35 - 140 °C (при 1 мм рт. ст.). Хорошо растворим в бензоле, толуоле, спирте, хлороформе, менее - в петролейном эфире; в воде не растворим.

В воздухе находится в виде паров и аэрозоля.

Обладает общетоксическим действием.

ПДК в воздухе - 3,0 мг/м<sup>3</sup>.

**Характеристика метода**

Метод основан на использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-детектированием.

Отбор проб проводится с концентрированием на фильтр и в этиловый спирт.

Нижний предел измерения содержания вещества в хроматографируемом объеме - 0,05 мкг.

Нижний предел измерения в воздухе - 0,5 мг/м<sup>3</sup> (при отборе 10 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций от 0,5 до 20,0 мг/м<sup>3</sup>.

Измерению не мешают: 3,4-диметоксибензилхлорид и вератрол.

Граница суммарной погрешности не превышает ±20 %.

Время выполнения измерения, включая отбор проб - 40 мин.

#### Приборы, аппаратура, посуда

Хроматограф жидкостный микроколоночный

серии «Милихром»

Хроматографическая колонка длиной 80 мм

и внутренним диаметром 2 мм, заполненная

сорбентом «Силасорб SPH C<sub>8</sub>» с размером зерен

9,0 мкм

Весы аналитические типа ВЛА-200 или ВЛР-2

ГОСТ 24104-80Е

Аспирационное устройство М-822

МРТУ 42-862-64

Фильтродержатели

ТУ 95-72-05-77

Пипетки, вместимостью 1, 2 и 5 мл

ГОСТ 20292-74

Колбы мерные, вместимостью 25 и 100 мл

ГОСТ 1770-74

Пробирки со шлифом градуированные,

вместимостью 10-15 мл

ГОСТ 1770-74

Поглотительные приборы с пористой пластинкой

#### Реактивы, растворы, материалы

Гомонитрил, х. ч., содержание основного

вещества ³ 95 %

ТУ 6-09-06-1092-83

Ацетонитрил, х. ч.

ГОСТ 6709-72

Вода дистиллированная

ГОСТ 5963-67

Этанол, реагент (96 %)

ГОСТ 5963-67

Фильтры АФА-ВП-10

ТУ 85-743-80

*Стандартный раствор гомонитрила № 1 с концентрацией 200 мкг/мл готовят растворением 20 мг вещества в 100 мл 96 %-ного этилового спирта.*

*Градуированные растворы №№ 2 - 7 с концентрациями 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 и 40,0 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением основного стандартного раствора гомонитрила этанолом. Растворы устойчивы в течение 2-х недель.*

#### Отбор проб воздуха

Воздух с объемным расходом 1 л/мин аспирируют через систему, состоящую из фильтра АФА-ВП-10, помещенного в патрон, и последовательно соединенного с ним поглотительного прибора с пористой пластинкой, заполненного 5-тью мл этилового спирта. Отбор проб проводится при охлаждении (вода + лед).

Для определения 0,5 ПДК достаточно отобрать 10 л воздуха.

Срок хранения проб - 4 суток.

#### Подготовка к измерению

Условия хроматографирования стандартных растворов и анализируемых проб:

Температура термостата колонок 25 °C

Скорость потока элюента 0,2 мл/мин

Элюент: водный ацетонитрил (40 % об.)

Длина волны УФ-детектора 232 нм

Скорость движения диаграммной ленты 6 мм/мин

Диапазон измерения самописца 100 мВ

Объем вводимой пробы	50 мкл
Время удерживания гомонитрила	2,95 мин
С использованием стандартных растворов гомонитрила №№ 2 - 7 строят градуировочный график, выражающий зависимость высоты пика вещества на хроматограмме от массового содержания его в пробе стандартного раствора; проводят 5 параллельных измерений для каждой концентрации. Градуировочный график проверяют не реже 1 раза в месяц и каждый раз при смене элюента.	

#### Проведение измерения

Содержимое поглотительного прибора в количестве 5 мл переносят в бюкс, туда же помещают фильтр с отобранный пробой и оставляют на 10 мин, периодически перемешивая. Степень десорбции гомонитрила с фильтра составляет не менее 97 %. Растворы устойчивы в течение 7 суток. Хроматографирование экстракта проводят в тех же условиях, что и хроматографирование стандартных растворов. Количество определение содержания гомонитрила в анализируемой пробе проводят по предварительно построеному градуировочному графику.

#### Расчет концентрации

Концентрацию гомонитрила ( $C$ ) в воздухе ( $\text{мг}/\text{м}^3$ ) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a \cdot \epsilon}{b \cdot V}, \text{ где}$$

$a$  - содержание гомонитрила в хроматографируемом объеме, найденное по градуировочному графику, мкг;

$b$  - объем пробы, взятой для хроматографирования, мл;

$\epsilon$  - общий объем анализируемого раствора, мл;

$V$  - объем воздуха, отобранного для анализа и приведенного к нормальным условиям, л ( см. приложение 1 ).

*Методические указания разработаны НИИ медицины труда РАМН, г. Москва.*

#### Приложение 1

Приведение объема воздуха к стандартным условиям (температура 20 °С и давление 760 мм рт. ст.) проводят по формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t(273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101,33}, \text{ где}$$

$V_t$  - объем воздуха, отобранный для анализа, л;

$P$  - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт. ст.);

$t$  - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета  $V_{20}$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

#### Приложение 2

##### *Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям*

°С	Давление Р, кПа/мм рт. ст.									
	97,33/730	97,86/734	98,4/738	98,93/742	99,46/746	100/750	100,53/754	101,06/758	101,33/760	101,86/764
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2038	1,2122
-26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0986	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
-6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
-2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557
+10	0,9944	0,9999	1,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9783	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,9391	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9199	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

#### Приложение 3

*Вещества, определяемые по ранее утвержденным методическим указаниям по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны*

Алюминий полифосфат	1981. - С. 58
Алюминия сульфат	Методические указания на фотометрическое определение алюминия, окиси алюминия и алюменикелевого катализатора в воздухе, в. 1 - 5. - М., 1981. - С. 3
2,5-бифенилилендиацетат	Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок, в. 1 - 5. - М., 1981. - С. 235
Винидат	Методические указания по измерению концентраций сульфата калия, калийной магнезии и хлорида калия в воздухе рабочей зоны методом пламенной фотометрии, в. 22. - М., 1988. - С. 182
Диэтилентриамин	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций третичных жирных аминов и аминоспиртов в воздухе рабочей зоны, в. 19. - М., 1984. - С. 137
Дубитель хромовый	Методические указания на фотометрическое определение окиси хрома в воздухе рабочей зоны, в. 14. - М., 1979. - С. 108
Дуниты	Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок, в. 1 - 5. - М., 1981, - С. 235
Кобазол	Методические указания по фотометрическому определению кобальта, в. 1 - 5. - М., 1981. - С. 14
Кремния карбид	Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок, в. 1 - 5. - М., 1981. - С. 235
Полибутилентерефталат	Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок, в. 1 - 5. - М., 1981. - С. 235
Полимер кубовых остатков ректификации стирола (термополимер «КОРС»)	Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок, в. 1 - 5. - М., 1981. - С. 235
В-фенилэтиламидинхлоруксусная кислота (контроль по бензолу)	Методические указания по газохроматографическому измерению ацетона, дихлорметана, дихлорэтана, трихлорэтена, бензола в воздухе рабочей зоны, в. 9. - М., 1986. - С. 23
Фториды редкоземельных металлов	Методические указания по ионометрическому измерению концентраций солей фтористоводородной кислоты, в. 21. - М., 1986. - С. 269
Хлопковая мука	Методические указания по фотометрическому определению БВК в воздухе рабочей зоны, в. 18. - М., 1983. - С. 139
Целлюлоза микрокристаллическая	Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок, в. 1 - 5. - М., 1981. - С. 235

Приложение 4

Рис. 1

Ловушка-концентратор. Общий вид

Рис. 2

Ловушка-концентратор